

Bowie & Medical

BODY CARE SYSTEMS

Bowie IPL 2.0



IPL flits ontharing
met PPT technology

Bowie Medical B.V. Parallelweg 7d 5349 AD Oss The Netherlands
Tel.: 0031 (0)412 69 01 16 Fax 0031(0)412 69 01 17
Info: www.bowiemedical.nl E-mail: info@bowiemedical.nl


Bowie Medical BV te Oss is exclusieve leverancier van de Bowie-IPL apparatuur in Nederland

Bowie IPL

De Bowie IPL 2.0 is een krachtig watergekoeld systeem met een werkcapaciteit tot 50 Joules per cm². Het systeem is voorzien van onder andere variabele puls-dosering, instelbare puls-reeksen en snelle puls-repetitie. Het systeem werkt met extreem lage kosten per puls. De Bowie IPL heeft volledige Medische CE Certificering. De Bowie IPL kan worden gebruikt voor permanente ontharing bij alle huid- en haartypes. Het apparaat kan ook gebruikt worden voor de behandeling van o.a. Couperose, Acne, Huidvlekken en Huidverjonging.

PPT Technology

De nieuwe Bowie IPL 2.0 maakt gebruik van de nieuwste "Perfect Pulse Technology" (PPT). De PPT technologie zorgt voor een volledig gecontroleerde perfecte "pulse-shape" (block-shape) met constante en gelijkmatig verdeelde energie afgifte gedurende de volledige puls lengte. PPT zorgt voor betere reproduceerbare resultaten en veilige, comfortabele en pijnloze behandelingen. (grafiek afbeelding is toegevoegd)

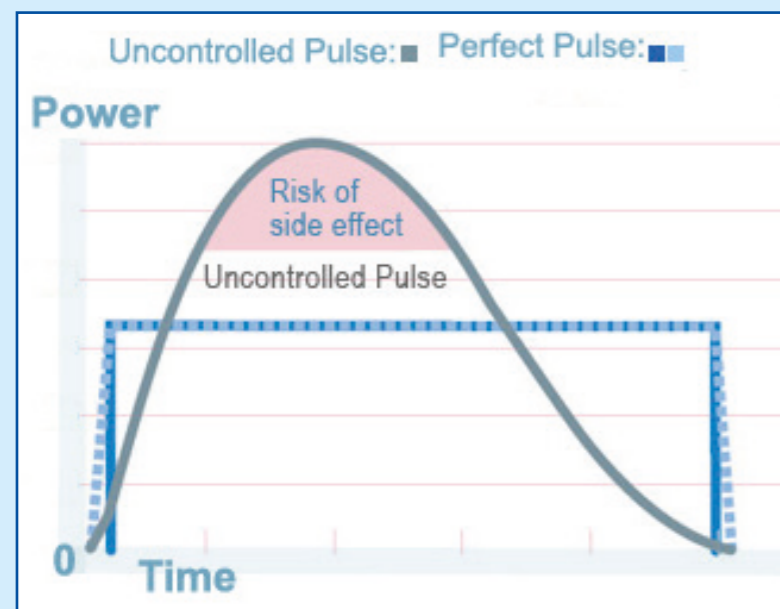

Vele voordelen

De nieuwe Bowie IPL 2.0 is voorzien van nieuwe intuïtieve Nederlandstalige software welke bedient wordt met een full colour touch screen. Het systeem werkt met gemakkelijk verwisselbare filters.

De Bowie IPL wordt gebruikt voor definitief ontharen bij alle huidtypes en haarsoorten. Het apparaat kan ook worden gebruikt voor behandeling van: Couperose, Acne en Pigmentatie en Skin-rejuvenation.

De krachtige Bowie IPL 2.0 is uiteraard voorzien van het noodzakelijke medische CE merk.

Huren zonder risico

De nieuwe BOWIE IPL 2.0 wordt ook aangeboden binnen het succesvolle EASY-RENT CONCEPT. Zonder enig financieel risico kan de nieuwe IPL worden gehuurd en zodra tot aankoop wordt overgegaan kan alle reeds betaalde huur van het aankoop bedrag worden afgetrokken. Mocht het apparaat toch niet bevallen dan kan de huur op elk gewenst moment en zonder bijkomende kosten worden

beëindigd. Bij de aanschaf van het apparaat behoort ook leasing tot de mogelijkheden. Dat kan al voor € 240,= per maand

Specificities

- Met Europees Medisch CE Certificaat
- Controle paneel met full-colour intuïtief touchscreen
- Menu in Nederlandse taal- Zeer hoge (medische) werkcapaciteit (tot 50 J / cm²)
- Spot Size: 15mm x 50mm (7.5 cm²)
- Gemakkelijk verwisselbare filters
- High Performance waterkoeling
 - Instelbare huid koeling
 - Zeer snelle puls repetitie (0,2 - 2,0 Hz)
 - Variabele puls instelling
 - Puls Serie Programmering (1-99 pulses)
 - Ergonomisch handstuk
 - Voet- & handbediening
 - Voorzien van nieuwste PPT technology

Beschikbare filters voor Bowie IPL: 430nm - 530nm - 590nm - 640nm - 690nm - 750nm (standaard 2 filters inbegrepen : 530nm en 640 nm)

Maten en specs : 600x350x430 mm - Gewicht: 28 kg - Peak Power: 1200 Watt - Pulse-lengte: 0,5 - 99 ms - Puls-pauzes: 1-99 ms

Service & Training

Bowie Medical BV levert bij dit systeem een volledige training en staat garant voor optimale technische ondersteuning. U ontvangt bij elke training een certificaat.

Over Bowie Medical

De afgelopen 5 jaar heeft de BOWIE IPL een belangrijke plaats verworven in de Nederlandse en Belgische IPL markt. Honderden tevreden gebruikers en geweldige klinische resultaten maken de Bowie IPL tot een van de meest populaire IPL systemen. De gemakkelijke huurmogelijkheden hebben bijgedragen aan het geweldige succes van de BOWIE IPL. Het nieuwe innovatieve BOWIE IPL 2.0 systeem is het resultaat van deze jarenlange ervaring. Ontwerp en engineering zijn van Nederlandse bodem.

